

EASY TRANSFER



EASY TRANSFER es un dispositivo de traslado fácil de usar en el día a día. Diseñado para las necesidades diarias, como lo traslado de la cama al cuarto de baño, permite al usuario moverse con seguridad y sin esfuerzo. El asiento gira para facilitar la entrada. Con apoyo para los pies y apoyo de rodilla acolchada. Puños para usuario y para el cuidador. Con 4 ruedas, 2 con frenos. Debido a las dimensiones compactas,

puede ser fácilmente utilizado en casa, pero también es una excelente solución para uso institucional, ayudando a prevenir la aparición de lesiones en cuidadores. Easy Transfer disponible en 3 versiones: Easy Transfer Compacto (base fija de 5 ruedas), Easy Transfer con apertura de piernas y Easy Transfer con apertura de piernas y ayuda para levantar.

Características




Rápido y seguro

Disminuye el número de traslados necesarios



Modelo con ayuda

Bombas de gas para regulación del asiento

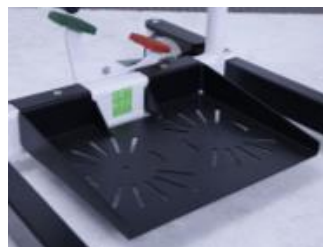

Modelo con apertura piernas

Para facilitar el acceso a diferentes tipos de dispositivos



Asiento giratorio

Facilita la entrada y salida del usuario



Easy Transfer Compact
(56AP0TRETCP)



Easy Transfer Compact
(56AP0TRETCP)



Easy Transfer con apertura piernas(56AP0TRETAP)



Easy Transfer con apertura piernas y ayuda levantar
(56AP0TRETAPAE)

Datos Técnicos

EASY TRANSFER COMPACT | APERT. PIERNAS | APERT.PIERNAS AYUDA LEVANTAR

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 56 AP 0 TR ET CP | 56 AP 0 TR ET AP | 56 AP 0 TR ET AP AE

	Con apertura piernas	Compact
Ancho total	610mm	628mm
Longitud total	1027mm	892mm
Ancho asiento	425mm	425mm
Ancho piernas abiertas	1082mm	-
Anchura mínima exterior	-	354mm
Altura rodillas-suelo	498mm	498mm
Altura asiento-suelo	798mm	798mm
Altura asiento-suelo (modelo con bombas gas)	630-798mm	630-798mm
Ruedas	100mm	100mm
Peso máximo usuario	150Kg	150Kg

Tolerancia: +/-1cm

NOTA: en caso de divergencia el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el fin de mejora continua, Orthos XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso. Más información disponible en el manual del producto.

Update: 09/19

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

ORTHOSMAIA XXI C/Manuel Nuñez, 2 3ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono + 34 886 312 806 // Teléfono móvil +34 678 994 993 // Email comercialespana@orthosxxi.com // Web www.orthosxxi.com